



allard IZ

(株)田沢製作所取扱い アラード社製装具カタログ

2019年1月

目次

■	アラード AFO (カーボン製短下肢装具)	3 ページ
■	ナビゲイト (軽度下垂足用装具)	14 ページ
■	キディライト (小児用足継手)	15 ページ
■	スワッシュ (小児用股関節装具)	16 ページ
■	SOT レスティングスプリント	19 ページ
■	セレクション 上肢サポーター	20 ページ
■	セレクション 膝サポーター	25 ページ

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT レスティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	-------------------	------------------



アラード AFO は、カーボンコンポジット製の超軽量短下肢装具です。踵を覆わず、装具と体により姿勢バランスを保持し、歩行パターンを正常歩行に近づけます。

特徴

- **前面シェルデザイン**
フットプレートから前面シェルに向け立ち上がる外側支柱が、ふくらはぎやアキレス腱を圧迫する事がないようデザインされております。
- **外側支柱**
外側に配置された支柱が安定した重心移動をサポートします。また、両側ユーザーへの対応が可能となります。
- **軽量**
カーボン、ガラス繊維、ケブラーからなる本製品は大変軽量で、装着するユーザーへの負担を最小限に抑えます。
- **種類の豊富さ**
アラード AFO 製品ラインナップの中からユーザーに最適な製品を選択することにより、ニーズに合った安定性、反発力を見つけることが可能です。
- **市販の靴を利用できます**
市販の靴に入れて使用できます。装具用の大きな靴を履く必要がありません。フットプレート部をトリミングする事も可能です。非常に薄く、装具装着時にズボンの下に隠せます。
- **踏み返し動作**
カーボン素材のフットプレートにより踏み返しが復元し、ダイナミックで機能的な歩行パターンを実現します。
- **オープンヒールデザイン**
踵を覆わないデザインなので、正常なバイオメカニカルチェーンでおこる踵骨の内外反の動きを阻害しません。
- **ロッカー機能を再現**
 - ① 踵接地時カーボンが撓み、底屈にブレーキをかけフットスラップを防ぎます。
 - ② 前面の支柱・シェルが安定性を発揮し、膝折れせずに体を前に推進させます。
 - ③ 撓んだフットプレートが踏み切りと共に反発し、つま先を上げながら歩幅を確保することができます。



アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT フィッティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	----------------------	-------------------	------------------

アラード AFO の適応と禁忌

適応

イプシロン、トーオフ、ブルーロッカー：

- 脳卒中、多発性硬化症、ポストポリオ、筋ジストロフィー、脊髄損傷、外傷性脳損傷、ギランバレー症候群、シャルコー・マリー・トゥース、脊髄髄膜瘤、神経障害、脳性麻痺による下垂足をサポートします。

トーオフ、ブルーロッカー：

- 後脛骨筋腱機能不全症や足趾切断。ブルーロッカーはショパール程度までの前足部切断に対応します。

キディゲイト、キディロッカー：

- つま先歩き等の異常歩行、二分脊椎、脳性麻痺、筋ジストロフィー等による軽度のクラウチゲイト、髄膜瘤による下垂足をサポートします。

禁忌

イプシロン、トーオフ、ブルーロッカー：

- 下肢潰瘍
- 足関節周囲の浮腫
- 中～強程度の足の変形
- 大腿四頭筋麻痺、膝の外反・内反、反張膝
- 強い痙性

キディゲイト、キディロッカー：

- 背屈運動ができない（少なくとも5度背屈ができること）
- 足関節の可動域が無い
- 大腿四頭筋麻痺
- 外反・内反膝、外反・内反足


注意

本製品を使用するにあたり、専門家によるフィッティング、カスタマイズの他、本製品の特徴や禁忌事項をユーザー並びに保護者にもご理解頂くことが重要です。

製品の選択、適切な靴の選択、フィッティング加工等を詳しく紹介した資料“医療従事者向けインストラクション”がございます。

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT レスティング スプリット	セクション 上肢サポーター	セクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	------------------	-----------------

製品選択ガイド

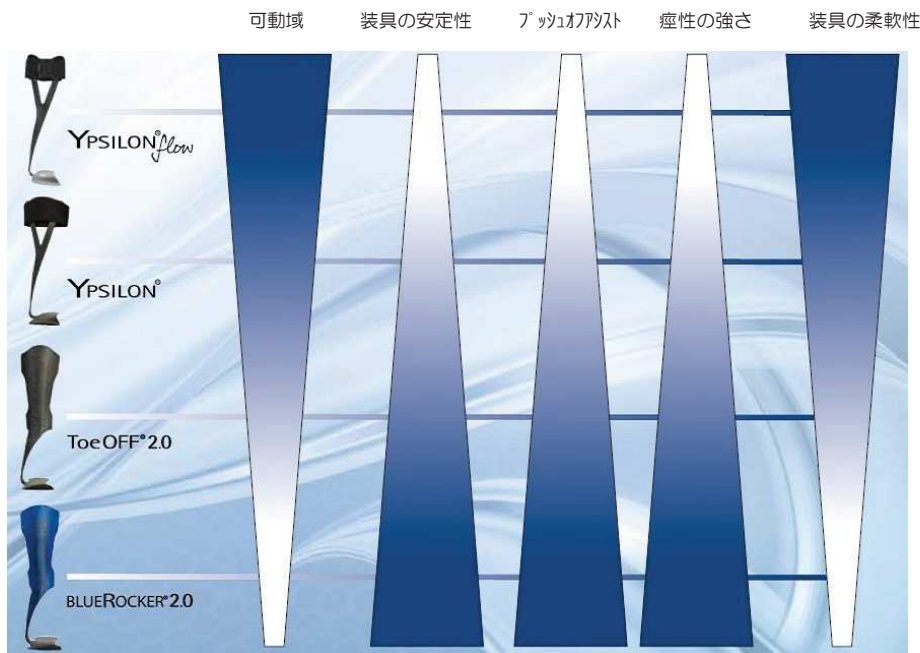

アラード AFO ラインナップ製品は外見上全て似ておりますが、対象がそれぞれ異なります。個々のユーザーに対して最適な製品を選択して下さい。また、足長だけでなくユーザーの体重や活動度に合わせてサイズを選択して下さい（例：1サイズ大きいサイズを選択し、フットプレートをトリミング処理すると、より高い支持性を得る事が可能です）。

アラード AFO のラインナップと特徴

イプシロン フロー1/2 (左) イプシロン	トーオフ 2.0 (左) トーオフ ショート	ブルーロッカー-2.0 (左) ブルーロッカー ショート	キディゲイト (左) キディロッカー
軽度の下垂足 自然な足関節動作が可能です。 長い支柱構造 支柱が大きく撓みます。 踵接地時の衝撃をやさしく吸収します。 支柱クリアランス 足背のクリアランスを保ったデザイン。 Y字形状 脛骨稜でのクリアランスを保ち、良好なフィットングを得やすい。	中程度の下垂足 中程度の下垂足と不安定な足関節をサポートします。 下肢前面を覆うシェル 脛骨を安定させ下肢をコントロールします。 外側支柱 外側支柱で不安定な足関節のコントロールを行います。 ※トーオフショートは全長・踵の差高を抑え、日本人仕様にした製品です。	中から高程度の下垂足 複合的要因による下垂足、足関節および近位関節の不安定をサポートします。 下肢前面を覆うシェル 脛骨を安定させ下肢をコントロールします。 外側支柱 外側支柱で不安定な足関節のコントロールを行います。 ※ブルーロッカーショートは全長・踵の差高を抑え、日本人仕様にした製品です。	小児用 SMO 装具等と併用することにより足底接地時のコントロールを行えます。


アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リフティング スプリット	セクション 上肢サポーター	セクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	------------------	-----------------

カーボン製短下肢装具

製品名：イプシロン フロー1/2

■完成用部品認可済 <下肢装具/足継手/B 制御式（補助付）2ニ方向：アラード YPS>

下腿前面のクリアランスを保ち、足関節の動きを制限しません。またY字形支柱により脛骨稜への圧迫を防ぎます。イプシロンよりも更に柔らかく撓み、よりダイナミックで底背屈の可動域が広いデザインになっております。活動性を制限されない軽度の麻痺のケースに適応いたします。また踵の差高がイプシロンよりも低く設定されております。

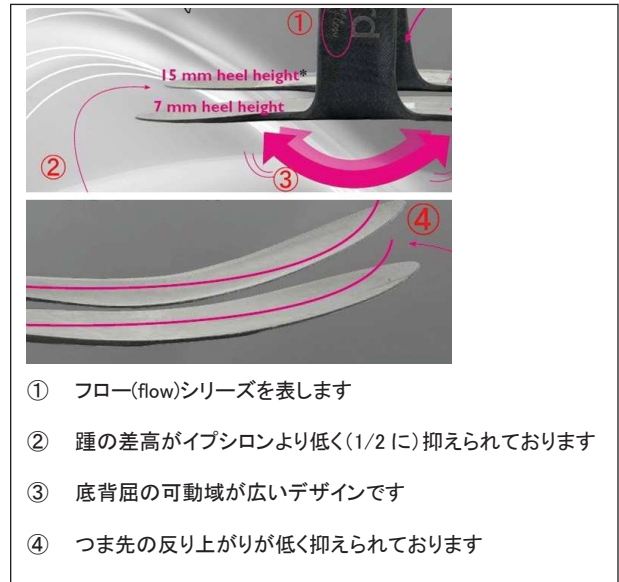

Item no 左	Item no 右	製品名	サイズ	フットプレートの長さ	高さ	踵の差高
28880 1011	28880 2011	イプシロン フロー1/2	S	23cm	35.5cm	0.7cm
28880 1012	28880 2012	イプシロン フロー1/2	M	24.5cm	36.5cm	0.7cm
28880 1013	28880 2013	イプシロン フロー1/2	L	27cm	37.5cm	0.7cm
28880 1014	28880 2014	イプシロン フロー1/2	XL	28.5cm	38.5cm	0.7cm



専用パッド、消耗交換用ストラップ

Item no	製品名	サイズ
28884 0012	イプシロン フロー1/2用脛骨パッド	S/M/L
28884 0014	イプシロン フロー1/2用脛骨パッド	XL

Item no	製品名	サイズ
28885 0000	イプシロン フロー1/2用ストラップ	1サイズ



イプシロン フロー1/2 用脛骨パッド

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リフティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	-------------------	------------------

カーボン製短下肢装具


製品名：イプシロン

■完成用部品認可済 <下肢装具/足継手/B 制御式（補助付）2方向：アラード YPS>

足関節に不安定の無い方へ自然な足関節ムーブメントでダイナミックなアシストを提供するデザインです。下腿前面のクリアランスを保ち、足関節の動きを制限しません。またY字形支柱により脛骨稜への圧迫を防ぎます。



Item no 左	Item no 右	製品名	サイズ	フットプレートの長さ	高さ	踵の差高
28400 1011	28400 2011	イプシロン	S	23cm	33cm	1cm
28400 1012	28400 2012	イプシロン	M	24.5cm	34cm	1cm
28400 1013	28400 2013	イプシロン	L	27cm	35cm	1.2cm

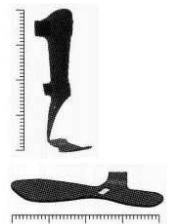

専用パッド、消耗交換用ストラップ

Item no	製品名	サイズ
28402 0011	イプシロン用パッド ストラップ付	S
28402 0012	イプシロン用パッド ストラップ付	M
28402 0013	イプシロン用パッド ストラップ付	L



イプシロン用パッド

Item no	製品名	サイズ
28402 0000	イプシロン用ストラップ	1サイズ

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT レスティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	-------------------	------------------

カーボン製短下肢装具


製品名：トーオフ 2.0

■完成用部品認可済 <下肢装具/足継手/B 制御式(補助付) 2二方向：アラード TOF>

アラード AFO シリーズのスタンダードともいえる本製品は幅広い適応に対応いたします。
つま先離れ後、つま先を引き上げ床面との距離を保つだけでなく、立脚期での安定性と踏み返しを提供致します。



Item no 左	Item no 右	製品名	サイズ	フットプレートの長さ	高さ	踵の差高
28920 1010	28920 2010	トーオフ 2.0	XS	21cm	36cm	1.2cm
28920 1011	28920 2011	トーオフ 2.0	S	23cm	38cm	1.2cm
28920 1012	28920 2012	トーオフ 2.0	M	24.5cm	40.5cm	1.5cm
28920 1013	28920 2013	トーオフ 2.0	L	27cm	43cm	1.6cm
28920 1014	28920 2014	トーオフ 2.0	XL	28.5cm	45cm	1.6cm

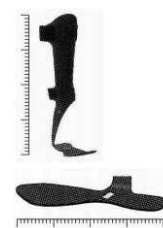

専用パッド、消耗交換用ストラップ

Item no	製品名	サイズ
28750 0010	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ソフトキット	XS
28750 0011	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ソフトキット	S
28750 0012	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ソフトキット	M
28750 0013	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ソフトキット	L
28750 0014	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ソフトキット	XL

Item no	製品名	サイズ
28760-size	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ストラップセット	本体サイズに従う



ソフトキット

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT レスティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	-------------------	------------------

カーボン製短下肢装具

製品名：トーオフ ショート（日本人タイプ）

■完成用部品認可済 <下肢装具/足継手/B 制御式（補助付）2二方向：アラード TOF>

日本人仕様用に構造的高さと踵の差高を低くしたモデルです。

つま先離れ後、つま先を引き上げ床面との距離を保つだけでなく、立脚期での安定性と踏み返しを提供致します。



Item no 左	Item no 右	製品名	サイズ	フットプレートの長さ	高さ	踵の差高
28380 1011	28380 2011	トーオフショート(日本人タイプ)	S	21.5cm	29.5cm	0.7cm
28380 1012	28380 2012	トーオフショート(日本人タイプ)	M	23.5cm	32cm	0.7cm
28380 1013	28380 2013	トーオフショート(日本人タイプ)	L	25.5cm	34cm	0.7cm

専用パッド、消耗交換用ストラップ

Item no	製品名	サイズ
28391 0011	トーオフショート(日本人タイプ)用ソフトキット	S
28391 0012	トーオフショート(日本人タイプ)用ソフトキット	M
28391 0013	トーオフショート(日本人タイプ)用ソフトキット	L

Item no	製品名	サイズ
28377 0011	トーオフショート(日本人タイプ)用ストラップセット	S
28377 0013	トーオフショート(日本人タイプ)用ストラップセット	M / L



ソフトキット

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リストリクティブ スプリット	セクション 上肢サポーター	セクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	-----------------------	------------------	-----------------

カーボン製短下肢装具


製品名：ブルーロッカー2.0

■完成用部品認可済 <下肢装具/足継手/B 制御式（補助付）2方向：アラード TOF>

ブルーロッカー2.0 はトーオフ 2.0 と同じ形状・デザインをしておりますが、硬い仕上がりになっており、支持力や重い負荷への耐久性も増しています。両側ユーザーや神経筋疾患等複合的要因による下垂足に対応します。近位関節に不安定があるケース等で、より高い安定性を提供いたします。前足部切断者への利用も可能です。




Item no 左	Item no 右	製品名	サイズ	フットプレートの長さ	高さ	踵の差高
28940 1010	28940 2010	ブルーロッカー2.0	XS	21cm	36cm	1.2cm
28940 1011	28940 2011	ブルーロッカー2.0	S	23cm	38cm	1.2cm
28940 1012	28940 2012	ブルーロッカー2.0	M	24.5cm	40.5cm	1.5cm
28940 1013	28940 2013	ブルーロッカー2.0	L	27cm	43cm	1.6cm
28940 1014	28940 2014	ブルーロッカー2.0	XL	28.5cm	45cm	1.6cm

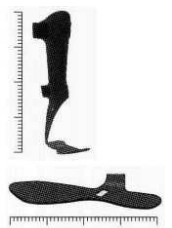

専用パッド、消耗交換用ストラップ

Item no	製品名	サイズ
28750 0010	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ソフトキット	XS
28750 0011	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ソフトキット	S
28750 0012	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ソフトキット	M
28750 0013	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ソフトキット	L
28750 0014	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ソフトキット	XL

Item no	製品名	サイズ
28760-size	トーオフ2.0、ブルーロッカー2.0用ストラップセット	本体サイズに従う

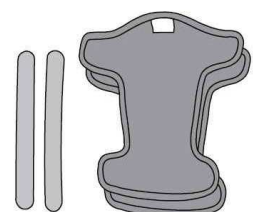

ソフトキット

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リフティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	-------------------	------------------

カーボン製短下肢装具

製品名：ブルーロッカー ショート（日本人タイプ）

■完成用部品認可済 <下肢装具/足継手/B 制御式（補助付）2ニ方向：アラード TOF>

ブルーロッカー2.0 を日本人仕様用に構造的高さと同の踵の差高を低くしたモデルです。

トーオフショートと同じ形状・デザインをしておりますが、硬い仕上がりになっており、支持力や重い負荷への耐久性も増しています。両側ユーザーや神経筋疾患等複合的要因による下垂足に対応します。近位関節に不安定があるケース等で、より高い安定性を提供いたします。前足部切断者への利用も可能です。



Item no 左	Item no 右	製品名	サイズ	フットプレートの長さ	高さ	踵の差高
特注	特注	ブルーロッカーショート(日本人タイプ)	S	21.5cm	29.5cm	0.7cm
特注	特注	ブルーロッカーショート(日本人タイプ)	M	23.5cm	32cm	0.7cm
特注	特注	ブルーロッカーショート(日本人タイプ)	L	25.5cm	34cm	0.7cm

専用パッド、消耗交換用ストラップ

Item no	製品名	サイズ
28391 0011	トーオフショート(日本人タイプ)用ソフトキット	S
28391 0012	トーオフショート(日本人タイプ)用ソフトキット	M
28391 0013	トーオフショート(日本人タイプ)用ソフトキット	L

Item no	製品名	サイズ
28377 0011	トーオフショート(日本人タイプ)用ストラップセット	S
28377 0013	トーオフショート(日本人タイプ)用ストラップセット	M / L



ソフトキット

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リフティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	-------------------	------------------

小児用カーボン製短下肢装具

製品名：キディゲイト ベビー / キディゲイト / キディロッカー

■完成用部品認可済 <下肢装具/足継手/B 制御式(補助付) 2ニ方向：アラード TOF>

小さいお子様に対応できるデザインです。自然な歩行パターンの復元を可能とします。


キディゲイト、キディロッカーをご利用の場合は、足底装具、SMO 等を併用することを強くお勧めします。荷重時に足関節が中間位になるようコントロールすることが大変重要です。

キディロッカーはキディゲイトと同じ形状・デザインをしておりますが、硬い仕上がりになっており、支持力や重い負荷への耐久性も増しています。両側ユーザーや神経筋疾患等複合的要因による下垂足に対応します。近位関節に不安定があるケース等で、より高い安定性を提供いたします。



Item no 左	Item no 右	製品名	サイズ	フットプレートの長さ	高さ	踵の差高
28372 1008	28372 2008	キディゲイト ベビー	ベビー-S	11cm	15cm	0.7cm
28372 1009	28372 2009	キディゲイト ベビー	ベビー-M	12.5cm	18cm	0.7cm
28372 1010	28372 2010	キディゲイト ベビー	ベビー-L	14cm	20cm	0.8cm
28900 1011	28900 2011	キディゲイト	S	16cm	22cm	0.8cm
28900 1012	28900 2012	キディゲイト	M	18cm	25.7cm	0.9cm
28900 1013	28900 2013	キディゲイト	L	20cm	29.5cm	0.9cm
28900 1014	28900 2014	キディゲイト	XL	21cm	31.5cm	0.9cm

Item no 左	Item no 右	製品名	サイズ	フットプレートの長さ	高さ	踵の差高
28902 1011	28902 2011	キディロッカー	S	16cm	22cm	0.8cm
28902 1012	28902 2012	キディロッカー	M	18cm	25.7cm	0.9cm
28902 1013	28902 2013	キディロッカー	L	20cm	29.5cm	0.9cm
28902 1014	28902 2014	キディロッカー	XL	21cm	31.5cm	0.9cm

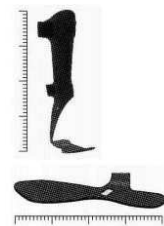

専用パッド、消耗交換用ストラップ

Item no	製品名	サイズ
28397 0008	キディゲイトベビー用ソフトキット	ベビー-S
28397 0009	キディゲイトベビー用ソフトキット	ベビー-M
28397 0010	キディゲイトベビー用ソフトキット	ベビー-L
28378 0011	キディゲイト、キディロッカー用ソフトキット	S
28378 0012	キディゲイト、キディロッカー用ソフトキット	M
28378 0013	キディゲイト、キディロッカー用ソフトキット	L
28378 0014	キディゲイト、キディロッカー用ソフトキット	XL



ソフトキット

Item no	製品名	サイズ
28373 0008	キディゲイトベビー用ストラップセット	ベビー-S
38373 0009	キディゲイトベビー用ストラップセット	ベビー-M
38373 0010	キディゲイトベビー用ストラップセット	ベビー-L
28368 0011	キディゲイト、キディロッカー用ストラップセット	S
28368 0012	キディゲイト、キディロッカー用ストラップセット	M
28368 0013	キディゲイト、キディロッカー用ストラップセット	L / XL

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リビング スプリット	セクション 上肢サポーター	セクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	-------------------	------------------	-----------------

小児用カーボン製短下肢装具アクセサリ

製品名：ソフトシェル

キディゲイトベビー、キディゲイト、キディゲイトロッカー用の外装シェルカバーです。



キディゲイト、キディロッカー用ソフトシェル

- グレーとピンクの2柄。
- ソフトキットのパッド機能を兼ね備えた外装シェルカバー。
(Dリング式ストラップが付属されます)

Item no グレー	Item no ピンク	製品名	サイズ
28359 0011	28358 0011	ソフトシェル	S
28359 0012	28358 0012	ソフトシェル	M
28359 0013	28358 0013	ソフトシェル	L
28359 0014	28358 0014	ソフトシェル	XL



キディゲイトベビー用ソフトシェル

- ブルーとピンクの2柄。

Item no ブルー	Item no ピンク	製品名	サイズ
28388 0008	28389 0008	ソフトシェル	ベビー-S
28388 0009	28389 0009	ソフトシェル	ベビー-M
28388 0010	28389 0010	ソフトシェル	ベビー-L

アラード AFO シリーズ

製品名：施設評価用

病院・医療施設様が施設内で装具選択の際に一時的にご利用頂くための試着評価用ユニットで、割安な価格設定になっております。ユーザー様へ納品できないように”NOT FOR RESALE”というラベルが貼り付けられています。各製品、全てのサイズのご用意があります。



以下のような利用例が挙げられます。

- ① 適切なサイズを確認
- ② 歩行パターンに改善がみられるかの確認
- ③ 必要なカスタマイズ、フィッティング加工作業の確認
- ④ 患者様が持続的に利用可能かどうかの確認

アロード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT 「スティング」スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	--------------	--------	-------	---------------------	-------------------	------------------

軽度下垂足用装具

製品名：ナビゲイト

付属のゴムバンドで足部を吊り上げて背屈を補助する装具です。ゴムバンドの位置を上下に変えることにより、吊り上げる力を調節することが可能です。フック付ソックスのフォーフット（別売）をご利用頂くと靴を脱いだ状態でもナビゲイトを使用できます。



ナビゲイト



使用例

適応

- 脳卒中、多発性硬化症、ポストポリオ等による足部背屈運動の低下

禁忌

- 痙縮、浮腫がある場合
※本装具は足部の不全を矯正するものではありません



フォーフット

Item no	製品名	サイズ	脛骨粗面から両果部上までの長さ
28410 0010	ナビゲイト	XS	23-28cm
28410 0011	ナビゲイト	S / M	28-33cm
28410 0013	ナビゲイト	L / XL	33cm以上

Item no	製品名	サイズ	中足骨頭部の足囲を計測
28415 0011	フォーフット	S	21-23cm
28415 0012	フォーフット	M	23-26cm
28415 0013	フォーフット	L	26-29cm

消耗交換用ゴムバンド

Item no	製品名	サイズ
28412 0010	ゴムバンド	XS
28412 0011	ゴムバンド	S / M
28412 0013	ゴムバンド	L / XL
28413 0010	ゴムバンド 強	XS
28413 0011	ゴムバンド 強	S / M
28413 0013	ゴムバンド 強	L / XL



アロード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リフティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	---------------	-------	---------------------	-------------------	------------------


小児用足継手

製品名：キディライト

■完成用部品認可済 <下肢装具/足継手/A 制御式：キャンパスカンジナビア KDL-J>

底背屈各 40 度の可動域調節機能を持つ超軽量足継手です。

脳性麻痺や二分脊椎等、小児神経疾患に対し早い時期からダイナミックな歩行を可能とします。

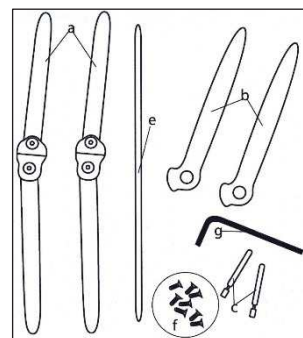

キット内容 (片足分のジョイントが含まれます)

利点

- 目的の肢位に保つことができます
- 歩行の向上
- 拘縮の予防

特徴

- ROM の制限 (底背屈調節を各 40 度まで調節可能)
- 小型、軽量：継手の重量は約 20g (1 本)
- サイズは 1 種類のみ

使用制限の目安

- 年齢：5 歳まで
- 身長：120cm まで
- 体重：25kg まで
- 抵抗力：16Nm

Item no	製品名	サイズ
62200 0000	キディライト	1サイズ

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT レスティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	-------------------	------------------

小児用股関節装具

製品名：スワッシュ

■完成用部品認可済 <下肢装具/股継手/B 遊動式：キャンプスカンジナビア SWA-J>



スワッシュは、脳性小児麻痺に生じる筋緊張から起こる股関節内転等による歩行障害、独立座位バランス維持困難等に対して、伸展屈曲制限をせず常に可変する外転角が子供たちの動作を妨げることなく、補助を行う股関節装具です。歩行機能に影響を及ぼす欠み足歩行が軽度の場合に適応されます。また、股関節筋群のバランスを向上させる機能があり、臼蓋形成不全を防止します。

適応

- 歩行に障害をきたす欠み足歩行
- 独立座位のバランスを崩す股関節内転筋緊張


禁忌

- 股関節の屈曲拘縮 > 20度
- 過度の脛骨捻転
- 肢位の矯正

どのようにしてスワッシュが機能するのか？

スワッシュの股継手のユニークなデザインが股関節の内転・内旋を防止し、立位・歩行・座位を安定させます。

- 伸展時には、股関節内転を防ぐための適度な外転角を保持します。また股関節伸展時に内転しようとする、装具の股継手が股関節の動きを制限する設計になっているため、起立の継続も可能となります（図1）。
- 歩行時に生じる股関節屈曲により、下肢を外転位に導きます。そのことが下肢の立位支持ベースを広げ、欠み足歩行を減少させ、歩行時のバランスが向上します（図2）。
- 立位から座位に移る場合、この外転位は継続するだけでなく大きな外転角を与えます（図3）。座位時の広い外転肢位は、子供たちが体幹のバランスをとるために手で支える必要を減少させます。これにより上肢がフリーになり、手を使った動作の範囲が広がります。

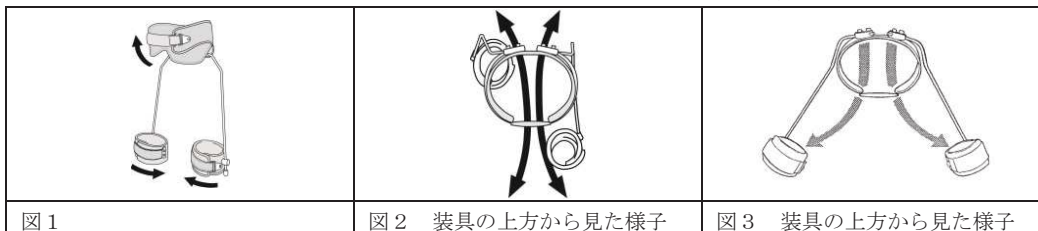

アロード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リフティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	-------------------	------------------

2つのモデル

スワッシュには、ステディとゴーの2つのモデルがあります。

 <p>Steady SWASH®</p>	<p>■モデル名：ステディ</p> <p>大きなポリエチレン製骨盤帯パーツがL2/L3から仙骨まで覆い、腹部、骨盤部をサポートします。 体幹に麻痺があったり、コントロールが限られている方へ後方、側方から支持性を持たせるデザインです。</p>  <p>【選択の目安】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体幹の支持を目的とするケース ・歩行よりも座位での装具装着を主とするケース
 <p>Go SWASH®</p>	<p>■モデル名：ゴー</p> <p>アルミ製骨盤フレームがL2/L3からS1/S2まで覆い、サポートします。</p>  <p>【選択の目安】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・挟み足歩行のコントロールを主な目的とするケース ・腸骨稜と胸郭のスペースが少ないケース



- ・ いずれのモデルも着脱の簡単なバックル方式を採用。また、大腿カフ、支柱は共通製品となります（スワッシュ ステディ サイズ1を除く）。
- ・ ウォーカー使用時にもスワッシュのジョイント部が邪魔にならないロープロファイル設計。

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT iスイング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	--------------------	-------------------	------------------

サイズガイド

スワッシュは継手付骨盤帯、大腿カフ、支柱から構成されており、各サイズの組合せが可能です。大腿カフ、支柱は両モデル共通製品となります（但し、スワッシュ ステディ サイズ1のみ他サイズと互換性はありません）。

■継手付骨盤帯

ステディ：ウエストの周径を計測
（体幹の支持のため、ウエスト部分を覆います。）

ゴー：上前腸骨棘部の周径を計測
（骨盤の支持のため、骨盤中央部に位置します。）

■大腿カフ

大腿骨顆上部の周径を計測
（大腿カフは、膝窩部にプレッシャーがかからない程度にできるだけ遠位に配置します。胸部に過度のプレッシャーがかかる場合、体幹が過度に前屈する場合、ハムストリングの圧迫による不快感がある場合等はカフを 2.5cm～7.5cm 近位に移動させる事で軽減させることができます。）

■支柱

ウエストから膝蓋骨中心の距離を計測
（フィッティング確認後、大腿カフ下部でカットして下さい。）


支柱は 123 度タイプを標準在庫としております。
小さな外転位の 115 度タイプは取寄せとなります。

サイズ	サイズの有無		適応周径
	ステディ	ゴー	
1	有	有	400-465mm
2	有	有	460-550mm
3	有	有	540-630mm
4	有	有	620-720mm
5	x	有	710-810mm
6	x	有	800-900mm

サイズ	サイズの有無		適応周径
	ステディ	ゴー	
1	有	有	210-250mm
2	有	有	250-290mm
3	有	有	290-330mm
4	有	有	330-380mm
5	有	有	380-440mm
6	有	有	440-500mm

サイズ	支柱の太さ		適応寸法
	ステディ	ゴー	
1	6mm	8mm	310mm
2	8mm	8mm	375mm
3	8mm	8mm	440mm
4	8mm	8mm	480mm
5	8mm	8mm	540mm
6	8mm	8mm	600mm

消耗交換パーツ

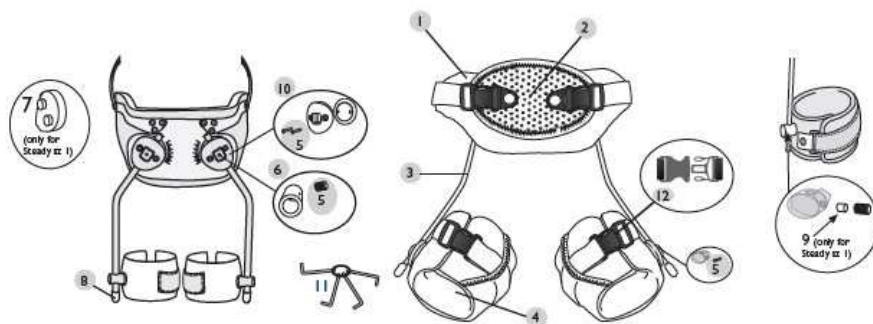

No.	品名	販売単位	メーカーコード ステディ	メーカーコード ゴー
1	骨盤帯用パッド(腹部パッド付)	1セット	28857	28858
2	腹部パッド	1個	28860	28860
3	支柱 115度	ペア	28855	28855
3	支柱 123度	ペア	28856	28856
4	大腿カフ用パッド	ペア	28859	28859
5	スクリューセット サイズ1用		28862-06	
5	スクリューセット サイズ1-6用		28861-08	28861-08
6	クランプリング サイズ1用	2個入り	28862-06	
6	クランプリング サイズ2-6用	2個入り	28862-08	28862-08
7	股継手カバー サイズ1用	2個入り	28863-06	
8	支柱保護キャップ サイズ1用	2個入り	28864-06	
8	支柱保護キャップ サイズ2-6用	2個入り	28864-08	28864-08
9	押さえ板	1個	28865	
10	股継手 サイズ1用	2個入り	28866-06	
10	股継手 サイズ2-6用	2個入り	28866-08	28867-08
11	レンチセット	1セット	28868	28868
12	バックル25mm サイズ1-3用	2個入り	28869-25	28869-25
12	バックル38mm サイズ4-6用	2個入り	28869-38	28869-38

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT レスティング スプリント	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	-----------------------------	-------------------	------------------

手関節、手指の安静保持装具

製品名：S.O.T レスティングスプリント



S.O.T レスティングスプリントは、手関節、手指の安静保持用装具です。

軽量で肌触りの良い仕上がりになっております。形状を調整できるアルミコアがポリエチレンフォームに組み込まれております。本製品の納品時の形状は痛みの緩和、理想のバイオメカニカルポジションを提供できる安静肢位になっております。

- 手関節、手指の安静保持
- 母指球筋のサポート
- 外在指屈筋の保持、ストレッチ
- 小児用サイズあり

適応

- 手関節、手指の安静保持
(脳卒中、脳性麻痺、関節リュウマチ、橈骨神経麻痺、筋ジストロフィー、浮腫)

本製品では伸縮性のあるカバーを使用し、面で装具を固定します。均一にプレッシャーがかかるカバー式なので、静脈還流を促進します。痙性等で、より強固な手関節の固定が必要な場合は非伸縮性のリストストラップをご使用下さい (別売り)。

手指ポジション用別売りアクセサリ



Item no	品名	左右	サイズ	計測 1 (MCP幅)	計測 2 (手首から指先)
28710	S.O.Tレスティング スプリント	左右あり	XXXS	5.5cm	< 12cm
			XXS	5.5 - 6.5cm	< 14cm
			XS	6.5 - 7.5cm	< 16cm
			S	6.5 - 7.5cm	< 18.5cm
			M	7.5 - 8.5cm	< 20cm
			L	8.5 - 9cm	< 21cm
別売りアクセサリ					
28711	MCPウエッジ	左右兼用	XXS	幅65mm	高さ10mm
			S	幅75mm	高さ15mm
			L	幅90mm	高さ20mm
28712	フィンガーディバイダー	左右兼用	P		
			M		
			L		
28713	リストストラップ	左右兼用	XXXS - XS S - L		




アクセサリ サイズ対応表

Item no	S.O.Tレスティング スプリント	XXXS	XXS	XS	S	M	L
28711	MCPウエッジ	XXS		S		S or L	
28712	フィンガーディバイダー	P		M		M or L	
28713	リストストラップ	XXXS - XS			S - L		

アロード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リストリグ スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	--------------------	--------------------------	------------------

セレクションサポーターシリーズ

最新素材“セレクション生地”で究極の装着感をご提供

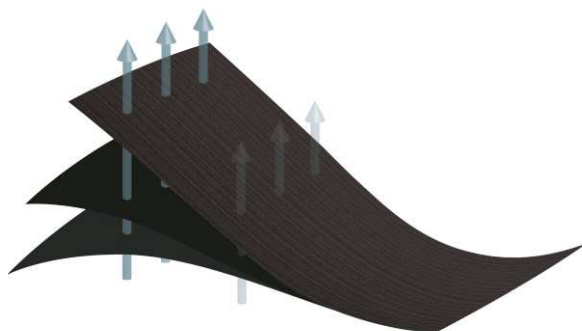

セレクション生地の内側部には肌に優しいソフトな生地素材を使用し、芯材となる中心部には肌から出る湿気を外に逃がす透湿性素材を採用。外側はすべすべした肌触りの半光沢仕上げの素材を使用し衣服との摩擦を最小限に抑えます。

セレクション サポーターシリーズでは、全ての製品に、この最新素材を採用致しました。大変薄く、しなやかな素材で縁加工不要の生地は優れたフィッティング、装着感をご提供致します。

拇指用サポーター

製品名：セレクション サムサポート

疼痛を緩和し CM 関節を安定させます

適応

- リュウマチ性関節炎
- 関節リュウマチ
- 外傷後
- 炎症



左 Item no	右 Item no	サイズ	手首周径
35203 1010	35203 2010	XS	<13cm
35203 1011	35203 2011	S	13-15cm
35203 1012	35203 2012	M	15-17cm
35203 1013	35203 2013	L	17-20cm
35203 1014	35203 2014	XL	>20cm

アロード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リストアップスプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	--------------------	---------------------------	------------------

手関節用サポーター

製品名：セレクション リストサポート ショート

丈の短いショートタイプ


ステーを使用せず、シンプルに手関節をサポートします

拇指関節の動きを妨げません



■装着が簡単です

グローブをはめるように装着し、ストラップを引っ張るだけで装着完了

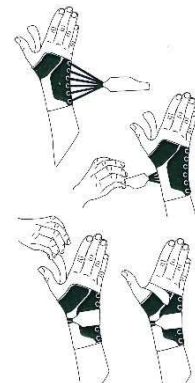

黒はスウェーデンより取寄せとなります

適応

- 手関節のサポート

左 Item no	右 Item no	サイズ	手首周径
35223 1010	35223 2010	XS	<11cm
35223 1011	35223 2011	S	11-14cm
35223 1012	35223 2012	M	14-17cm
35223 1013	35223 2013	L	17-20cm
35223 1014	35223 2014	XL	20-23cm

アロード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リスティック スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	--------------------------	------------------

手関節用サポーター

製品名：セレクション リストサポート ソフトタイプ

手関節を固定します


ソフトタイプは拇指関節の動きを妨げません



拇指関節の動きを妨げません

■装着が簡単です

グローブをはめるように装着し、ストラップを引っ張るだけで装着完了

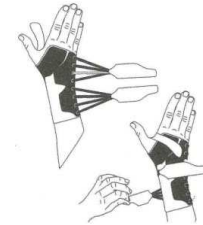

■支持性に優れます

手掌・甲のプラスチックステーが手関節をしっかり固定します



適応

- 手関節炎
- 関節リュウマチ

左 Item no	右 Item no	サイズ	手首周径
35204 1010	35204 2010	XS	<11cm
35204 1011	35204 2011	S	11-14cm
35204 1012	35204 2012	M	14-17cm
35204 1013	35204 2013	L	17-20cm
35204 1014	35204 2014	XL	20-23cm

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リフティング スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------------	---------------------------	------------------

手関節用サポーター

製品名：セレクション リストサポート リジッドタイプ

手関節を固定します


リジッドタイプは拇指関節まで固定し、広い範囲をサポートします



拇指関節まで固定されているので、ギプス除去後の固定にも使用できます

■装着が簡単です

グローブをはめるように装着し、ストラップを引っ張るだけで装着完了

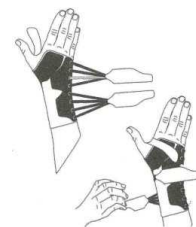

■支持性に優れます

手掌・甲のプラスチックステーが手関節をしっかりと固定します



適応

- 手関節炎
- 関節リュウマチ
- ギプス除去後の固定

左 Item no	右 Item no	サイズ	手首周径
35206 1010	35206 2010	XS	<11cm
35206 1011	35206 2011	S	11-14cm
35206 1012	35206 2012	M	14-17cm
35206 1013	35206 2013	L	17-20cm
35206 1014	35206 2014	XL	20-23cm

アラード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リストアップ	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	---------------	---------------------------	------------------



セレクション

小児用 サム&リストサポート

小児用拇指サポーター

製品名：セレクション 小児用サムサポート

CM 関節を安定させます

適応

- 手関節炎

左 Item no	右 Item no	サイズ	手首周径	掌幅
35300 1009	35300 2009	XXS	8-11cm	5-6cm
35300 1010	35300 2010	XS	8-11cm	6-7cm
35300 1011	35300 2011	S	10-12cm	7-8cm
35300 1012	35300 2012	M	12-14cm	8-9cm
35300 1013	35300 2013	L	14-16cm	8-9cm



小児用手関節サポーター

製品名：セレクション 小児用リストサポート

手関節を固定します

適応

- 手関節炎

左 Item no	右 Item no	サイズ	手首周径	掌幅
35305 1009	35305 2009	XXS	8-11cm	5-6cm
35305 1010	35305 2010	XS	8-11cm	6-7cm
35305 1011	35305 2011	S	10-12cm	7-8cm
35305 1012	35305 2012	M	12-14cm	8-9cm
35305 1013	35305 2013	L	14-16cm	8-9cm



アロード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リストアップスリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	-------------------	-------------------	------------------

膝関節用サポーター

製品名：セレクション マイナーラップ

前合わせ式

ステンレススパイラルステー内蔵



適応

- 膝の荷重時痛
- 軽度膝靭帯損傷・捻挫

Item no	サイズ	膝蓋骨中心より 15cm下の周径	膝蓋骨中心 の周径	膝蓋骨中心より 15cm上の周径
35701 0010	XS	25-28cm	27-30cm	31-36cm
35701 0011	S	28-31cm	30-33cm	36-40cm
35701 0115	Sプラス	28-31cm	30-33cm	40-44cm
35701 0012	M	31-34cm	33-36cm	40-44cm
35701 0125	Mプラス	31-34cm	33-36cm	44-48cm
35701 0013	L	34-37cm	36-39cm	44-48cm
35701 0135	Lプラス	34-37cm	36-39cm	48-53cm
35701 0014	XL	37-40cm	39-43cm	48-53cm
35701 0145	XLプラス	37-40cm	39-43cm	53-60cm
35701 0015	XXL	40-46cm	43-50cm	53-60cm
35701 0155	XXLプラス	40-46cm	43-50cm	60-67cm


アロード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT リストリクティブ	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	-----------------	-------------------	------------------

複合靭帯損傷用サポーター

製品名：セレクション オプティマラップ

前合わせ式

伸展屈曲制限角度を調節可能な支柱を使用

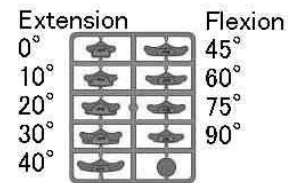

付属のアタッチメントにより支柱の伸展屈曲制限角度を調節できます

適応

- 中程度の膝過伸展
- ACL 部分損傷
- 中程度の内外反動揺
- 変形性膝関節症
- 術後の安静保持

Item no	サイズ	膝蓋骨中心より 15cm下の周径	膝蓋骨中心 の周径	膝蓋骨中心より 15cm上の周径
35703 0010	XS	25-28cm	27-30cm	31-36cm
35703 0011	S	28-31cm	30-33cm	36-40cm
35703 0115	Sプラス	28-31cm	30-33cm	40-44cm
35703 0012	M	31-34cm	33-36cm	40-44cm
35703 0125	Mプラス	31-34cm	33-36cm	44-48cm
35703 0013	L	34-37cm	36-39cm	44-48cm
35703 0135	Lプラス	34-37cm	36-39cm	48-53cm
35703 0014	XL	37-40cm	39-43cm	48-53cm
35703 0145	XLプラス	37-40cm	39-43cm	53-60cm
35703 0015	XXL	40-46cm	43-50cm	53-60cm
35703 0155	XXLプラス	40-46cm	43-50cm	60-67cm

アロード AFO	ナビゲイト	キディライト	スワッシュ	SOT レスフィット® スプリット	セレクション 上肢サポーター	セレクション 膝サポーター
----------	-------	--------	-------	----------------------	-------------------	------------------

パテラ用サポーター

製品名：セレクション パテラ

スリーブ式

ステンレススパイラルステー内蔵

パテラパッド付



パテラパッドを内側、外側、下側のいずれかに配置可能

適応

- 膝蓋骨脱臼
- 過度可動域
- 膝蓋腱痛
- オスグッド病

Item no	サイズ	膝蓋骨中心より 15cm下の周径	膝蓋骨中心 の周径	膝蓋骨中心より 15cm上の周径
35704 0010	XS	28-31cm	30-33cm	34-39cm
35704 0011	S	31-34cm	33-36cm	39-43cm
35704 0012	M	34-37cm	36-39cm	43-47cm
35704 0013	L	37-40cm	39-42cm	47-51cm
35704 0014	XL	40-43cm	42-46cm	51-56cm



輸入販売元

株式会社 田沢製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-35-28 メゾンドール本郷 2F

マーケティング部直通ダイヤル TEL.03-3812-6481 FAX.03-5804-8595 www.tazawa.co.jp